



# OLERUD MKII




um produto

**UM SISTEMA COMPLETO PARA CIRURGIA CERVICAL**

# OLERUD CERVICAL®

## SISTEMA PARA COLUNA CERVICAL

O Sistema Cervical Olerud é um sistema cervical posterior baseado em princípios comprovados e desenvolvidos para simplificar o manejo intra-operatório. Fixação posterior de occipício ao T2 para traumas, tumores, malformações, deformidades, artrite reumatoide e condições associadas, instabilidades pós laminectómica e doenças degenerativas da coluna cervical.

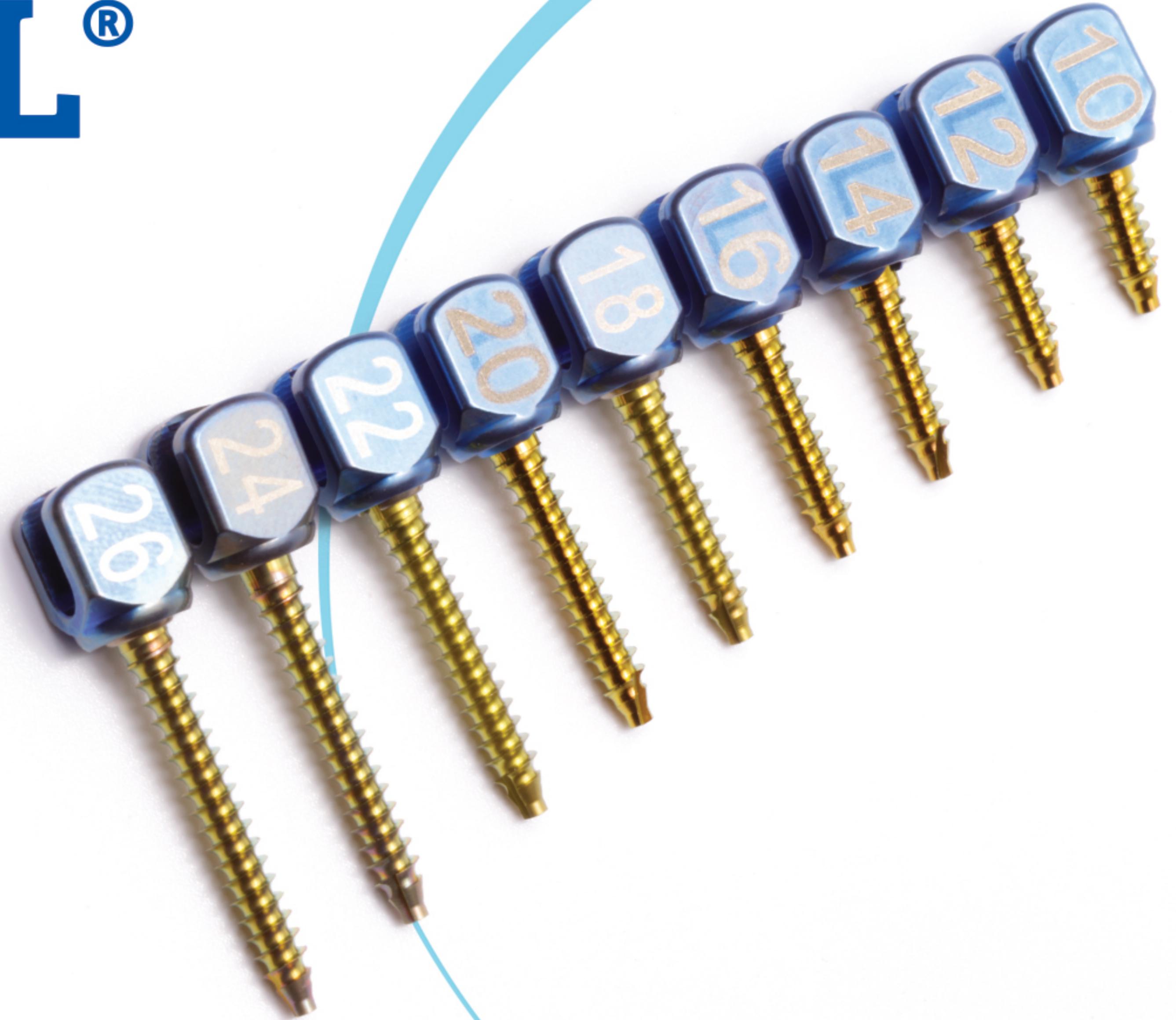

### Características

- 
- 
- 
- 
- 

Parafuso Massa lateral com travas EWS patenteada proporcionam um perfil de 30% menor ao sistema se comparado aos parafusos poliaxiais tradicionais.

Garra C1 proporciona um fixação C1-C2 simples e rígida juntamente com o conector ME.

Perfil de rosca Sägengewinde previnem o alargamento das cabeças dos parafusos, ganchos, combinações.

Posicionamento independente de parafusos antes do travamento às hastes .

Fixação adicional pode ser incluída a uma construção montada

### Indicações de Uso

Fixação posterior do occipício ao T2 para traumas, tumores, malformações, deformidades, artrite reumatoide e condições associadas, instabilidades pós laminectomia e doenças degenerativas da coluna cervical.

importado por

